


## Rurka tracheostomijna DEMED II, bez otworu

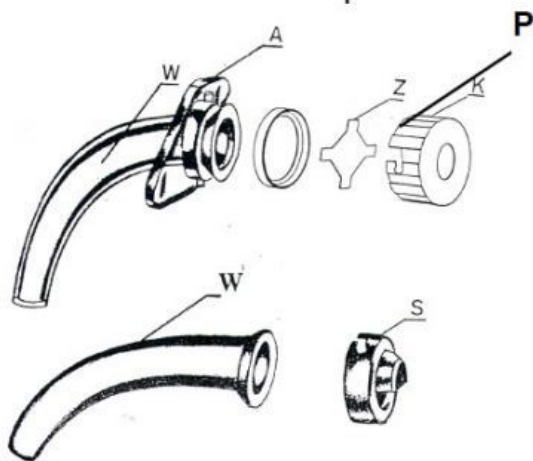

Cena: 212,00 pln

### Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | DEMED          |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

### Opis produktu

*Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.*

### Przeznaczenie rurek tracheostomijnych:

Rurki tracheostomijne z polietylenu są przeznaczone do stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową np. podczas radioterapii nowotworów krtani i gardła dolnego, kiedy wykonanie tracheostomy i zastosowanie rurki tracheostomijnej przywraca właściwą drożność drogi oddechowej. Rurki mogą być stosowane okresowo lub w sposób ciągły. Materiał i kształt rurek nie powoduje zmian śluzówki tchawicy przy długotrwałym stosowaniu.

### Charakterystyka rurek tracheostomijnych:

Kompletny zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego. Koniec rurki zewnętrznej jest lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy.

Zestawy są pakowane w torebki foliowo-papierowe po jednej sztuce i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO).

Polecamy również akcesoria do rurek tracheostomijnych.

#### Zawartość zestawu

| Elementy składowe           | Zestaw |
|-----------------------------|--------|
| Rurka zewnętrzna bez otworu | 1 szt. |
| Rurka zewnętrzna z otworem  | 1 szt. |
| Rurka wewnętrzna bez otworu | 1 szt. |
| Rurka wewnętrzna z otworem  | 1 szt. |
| Kapturek osłonowy           | 1 szt. |
| Kapturek osłonowy z kratką  | 1 szt. |
| Kapturek zwykły             | 1 szt. |
| Zatyczka                    | 1 szt. |
| Tasiemka mocująca           | 1 szt. |

#### Rozmiary rurek tracheostomijnych

W zależności od średnicy zewnętrznej otworu dystalnego (od strony pacjenta) wytwarza się osiem różnych rozmiarów rurek oznaczonych symbolami od 5 do 12.

#### Długość rurek tracheostomijnych

W zależności od długości rurki dzielą się na standardowe (S), przedłużone (L) i długie (LL).

#### Odmiany rurek

Rurki, niezależnie od rozmiaru i długości, mogą występować bez otworu w środkowej części rurki zewnętrznej (oznaczone symbolem A) i z otworem (oznaczone symbolem B)

Wymiary rurek w milimetrach (wartości nominalne)

| Rozmiar            |                                                        |           |          |            |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---|
|                    |                                                        |           | 5        | 6          | 7 |
| S<br>(standardowe) | średnica<br>zewnątrz<br>na końcu<br>rurki /<br>długość | 9 / 60    | 10 / 65  | 11 / 70    |   |
| L<br>(przedłużone) | średnica<br>zewnątrz<br>na końcu<br>rurki /<br>długość | 8,7 / 80  | 9,5 / 85 | 10,5 / 90  |   |
| LL<br>(długie)     | średnica<br>zewnątrz<br>na końcu<br>rurki /<br>długość | 8,5 / 105 | 9 / 130  | 10,5 / 130 |   |

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

## Parametry

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar | LL (0,00 pln), S (0,00 pln), L (0,00 pln)                                                                         |
| Wersja  | 10 (0,00 pln), 11 (0,00 pln), 12 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln), 7 (0,00 pln), 8 (0,00 pln), 9 (0,00 pln) |